


# Low Gas Message

2017.02.09



# 訊息內容

- 氣瓶氣體容量太低或是空了(<4%)

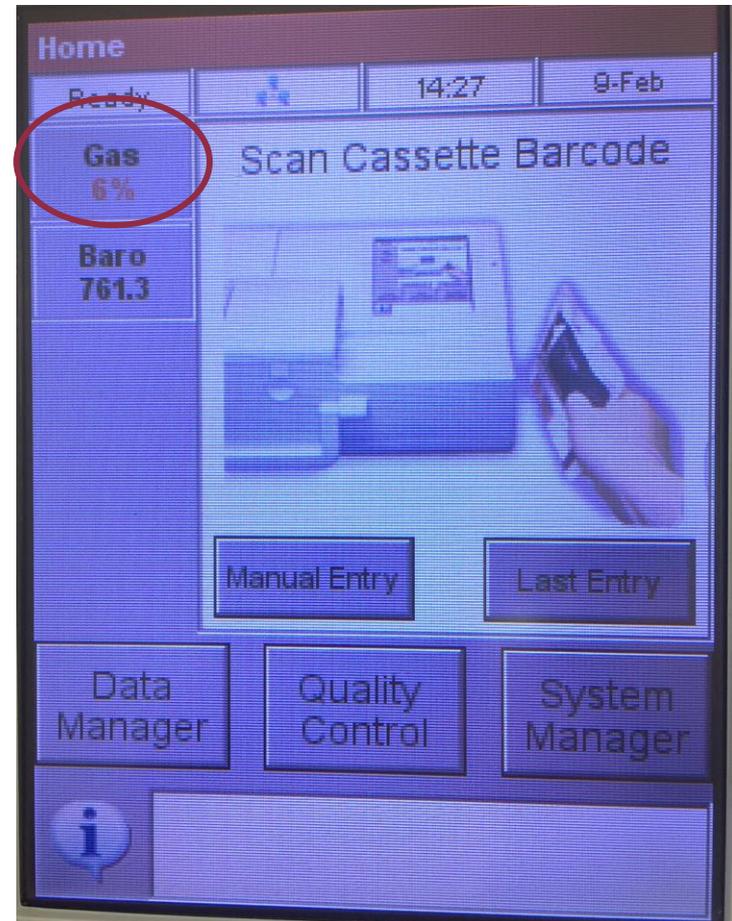

# 儀器顯示的錯誤訊息

---

- ! Not Ready : Low Gas
- Warning! Low gas. One test remaining.
- Stop! Low gas. Replace now.

# ! Not Ready : Low Gas 問題/應對

---

- 氣瓶氣壓過低:
  - 重新安裝氣瓶

## Warning! Low gas. One test remaining. 問題/應對

- 當氣瓶氣體容量少於4%，會看到這個警示：
  - 按OK去完成目前的這個檢測
  - 重新安裝氣瓶

# Stop! Low gas. Replace now.問題/應對

---

- 氣瓶已空：
  - 重新安裝氣瓶並按OK


# 可能原因

---

- 氣瓶剩餘量過低或是空
- 氣瓶沒有旋緊 (氣體不定時漏出)
- 氣體漏出

注意: 氣瓶必須被儲存於4-30°C，過冷的環境會造成壓力測量問題或造成漏氣

# 故障排除

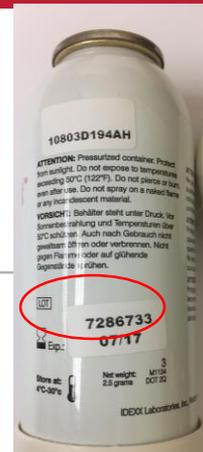

密封墊是否同時更換?

←更換不到1年

確認蠕動式泵浦是否使用>1年

LOT#



↓超過1年請更換

↓  
↓  
↓  
↓  
↓

未同時更換，請更換後狀況是否排除

↓未解除

密封墊下方乳突部分是否損壞?



否

此氣瓶更換後做檢量是否<100次

→已大於100次檢驗

↓小於100次檢驗

取出氣瓶紀錄LOT#。以酒精潤濕棉棒清潔氣瓶裝載處污垢，清潔完畢後重新安裝氣瓶。

從System Manager>Diagnostic>Sensor分頁紀錄目前顯示GAS pressure的剩餘%，重啟儀器(氣瓶已安裝)，問題是否排除?

更換不同LOT#的氣瓶，並記錄有問題的LOT#



↓否

↓是

撥打愛德士技術服務專線

安裝新氣瓶，在剛剛的路徑GAS 右側按NEW，刷氣瓶條碼後按OK，讓儀器暢通氣體管路，是否排除?

↓否

撥打愛德士技術服務專線

**IDEXX**